



Regione Toscana

Settore Sanità digitale e innovazione


Analisi dell'utilizzo dei test sierologici rapidi
nell'ambito della pandemia da COVID-19
Decreto n. 4872 del 02/04/2020

Procedura per l'uso App **#acasainsalute** operatori SSR


1. La APP **#acasainsalute** è al momento disponibile solo per dispositivi mobili con Android (a giorni uscirà la versione iOS)
2. Aprire con il proprio dispositivo mobile il sito web <https://acasainsalute.ssr.toscana.it> e scaricare la App **#acasainsalute** con l'apposito pulsante
3. Installarla nel proprio dispositivo (tablet o smartphone)



4. Avviare l'applicazione

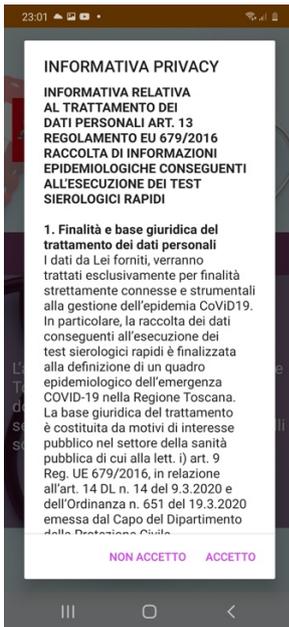


5. Leggere l'informativa privacy ed accettarla (se non si accetta la App si chiude)

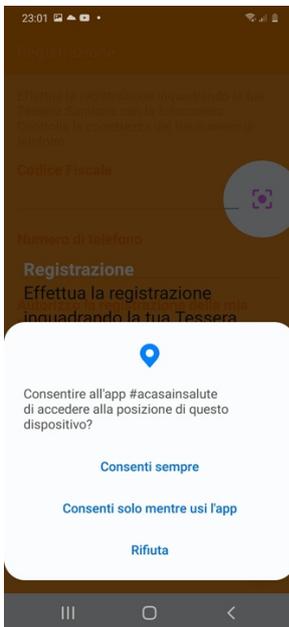

6. Selezionare "Consenti sempre" alla domanda di utilizzo della posizione (non verrà più chiesto in seguito).



7. Apparirà la schermata che spiega come registrarsi inquadrando con la fotocamera la Tessera Sanitaria (premere il pulsante [●])

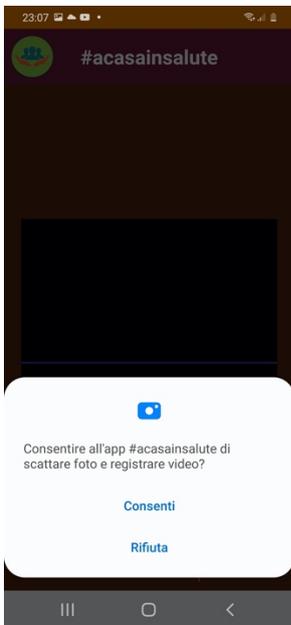

8. Selezionare "Consenti" alla domanda di utilizzo della fotocamera (non verrà più chiesto in seguito).



9. Inquadrare la propria Tessera Sanitaria per leggere il Codice Fiscale

Registrazione

Effettua la registrazione inquadrando la tua Tessera Sanitaria con la fotocamera. Controlla la correttezza del tuo numero di telefono

Codice Fiscale
BLRNR68L13G920R

Numero di telefono

Ultime 5 cifre tessera sanitaria

Autorizzo la registrazione della mia posizione GPS

10. Inserire il proprio numero di telefono cellulare (servirà in seguito), inserire le ultime 5 cifre della tessera sanitaria ed autorizzare (o meno) la registrazione della posizione GPS del luogo di rilevazione test; premere il pulsante salva.

NOTA BENE: l'attivazione del GPS **non ha niente a che vedere** con il contact-tracing, **non traccia** i movimenti del soggetto che la utilizza, **né traccia** con chi si è venuti in contatto. E' solo una rilevazione puntuale del luogo di rilevazione del test.



11. Apparirà la schermata che spiega come effettuare il test sierologico, premere il tasto in basso a dx (goccia)



12. A questo punto sarà possibile fare 2 tipi di rilevazione:

- per **me stesso**
- per altro utente (gruppi)

descriviamo di seguito la procedura per **me stesso** dal momento che gli operatori del SSR utilizzeranno soprattutto questa opzione

00:48 Test Sierologico
Seleziona Qualifica

Utente
MIO

Codice Fiscale
BLRNRD68L13G920R

Lavori per SSN ? SI NO

13. rispondere **SI** alla domanda “**Lavori per SSN ?**” e procedere con il resto della compilazione, andando avanti

00:51 Test Sierologico
Seleziona Qualifica

Utente
MIO

Codice Fiscale
BLRNRD68L13G920R

Lavori per SSN ? SI NO

Seleziona Ruolo
DIRIGENTE SPTA

Azienda sanitaria
AOU Careggi

Operante in...
Ospedale

Area specifica
Area tecnica

14. **Seleziona Ruolo** scegliendo l’opportuna categoria (infermiere, dirigente medico, OSS, tecnico, etc) dall’elenco a video.

21:04

Seleziona ruolo

- ALTRO DIRIGENTE SANITARIO
- DIRIGENTE SPTA
- ASSISTENTE SANITARIO
- AUSILIARIO
- DIRIGENTE MEDICO
- INFERMIERE
- OSS
- OSTETRICHE
- PERSONALE RIABILITAZIONE
- TECNICO PREVENZIONE
- TECNICO SANITARIO
- ALTRO

ANNULLA

Seleziona la voce **Azienda sanitaria** e poi quella **Operante in...** (ospedale, distretto, dip. prevenzione) ed infine l’**Area Specifica** (COVID, NO COVID, ecc.); andare avanti

23:30 Test Sierologico
Dati Anamnestici

Sintomi dal 01/01/2020

Febbre sopra 37.5 SI No

Tosse SI No

Diarrea SI No

Dispnea SI No

Alterazione o perdita gusto
 SI NO

Alterazione o perdita olfatto
 SI NO

Esposto ad un caso COVID confermato
 SI NO

**Dal 01/01/2020 nel nucleo famig
ci sono stati episodi influenzali**

15. Compilare la scheda di raccolta **dati anamnestici** rispondendo alle domande (quando le domande sono in **carattere rosso** indica obbligatorietà di risposta)

00:57 Test Sierologico
Test Sierologico

Data rilevazione
13/04/2020

Ora rilevazione
00:55:20

Tampone SI No

Esito Pos Neg

Data
13/03/2020

Test sierologico SI No

Tipo Prelievo ?

VENOSO PUNGIDITO

16. Infine compilare la scheda **Test sierologico** selezionando **Tampone** (in caso fosse stato eseguito, va inserito l'**Esito** e la **Data** di esecuzione) e **Test sierologico SI**.

17. Dopodichè scegliere **Tipo Prelievo VENOSO** ed inserire il **Luogo di effettuazione** (ospedale, reparto, medicina del lavoro, ecc.).

N.B. Premendo l'ìcna del punto interrogativo compare la guida alla corretta esecuzione del test rapido, riservato ad altre categorie di operatori.

18. Controllare i dati visualizzando il **Riepilogo dati inseriti** ed in caso di correttezza, premere **CONFERMA**



19. Selezionare la voce **INVIA**



20. Tornerete quindi alla schermata principale, dove apparirà l'elenco delle rilevazioni effettuate.

N.B. In caso di ripetizione del prelievo venoso o di esecuzione di test rapido, è possibile ripetere la registrazione.

GUIDA alla effettuazione del TEST RAPIDO

<p>1</p> <p>Scartare il test rapido poco prima dell'uso</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>2</p> <p>Disinfettare la zona della digitopuntura</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>3</p> <p>Puntura del polpastrello</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>4</p> <p>Aspirare una goccia di sangue intero usando la pipetta in dotazione nel kit</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>
<p>5</p> <p>Depositare la goccia di sangue nel pozzetto del test rapido</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>6</p> <p>Aggiungere due gocce del tampone diluente nel pozzetto del buffer</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>7</p> <p>Attendere 10 minuti (e non oltre 15 minuti) per fare la lettura del test</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● SUCCESSIVO</p> <p> ○ <</p>	<p>8</p> <p>Se accanto alla scritta IgG appare una linea, il test è POSITIVO, altrimenti è NEGATIVO Se accanto alla scritta IgM appare una linea, il test è POSITIVO, altrimenti è NEGATIVO Se accanto alla lettera C appare una linea, il test è VALIDO</p>  <p>CHIUDI ●●●●●●●● CHIUDI</p> <p> ○ <</p>